

PASOS PARA LA DESINFECCIÓN DE LA INHALOCAMARA (USO DOMICILIARIO)



1. Desarma totalmente la inhalocámara.



2. Sumerge las piezas en agua limpia y tibia usando un detergente suave deje las piezas de 5 a 10 minutos, lavar con abundante agua, cambie el agua por agua limpia y agregue vinagre o hipoclorito (1cc por 1 litro de agua) dejar las piezas sumergidas en esta solución por 10 minutos, luego lave con abundante agua.




3. Confirma que todas las piezas estén completamente secas para volver a utilizar la inhalocámara.

NOTA: EL LAVADO SE DEBE DE HACER REGULARMENTE 2 VECES A LA SEMANA, GUARDAR EN UN LUGAR FRESCO Y SECO (BOLSA PLASTICO SELLADA).

Lo que no se debe hacer

- Usar directo sobre el dispositivo.
- Inhalaciones rápidas y sin pausa respiratoria.
- Inhalaciones seguidas.
- Descoordinación entre el disparo y la inhalación.

Verificación del contenido del inhalador

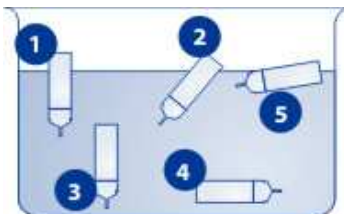

1. 1/2 medicamento - 100 inhalaciones aprox.
2. 1/4 medicamento - 50 inhalaciones aprox.
3. 3/4 de medicamento - 25 inhalaciones aprox.
4. Lleno - 200 inhalaciones.
5. Vacío.

Como hacer el espaciador casero.

- Corte la parte superior de una botella plástica de 500cc de agua de tal manera que quede como un vaso.
- Haga un orificio dentro de la base de la botella del tamaño de la boquilla del inhalador.
- En la parte superior del vaso corte una muesca que corresponde al tamaño de la nariz.
- Asegúrese que al colocar la botella en la cara quede tapando boca y nariz para que el aire no se escape.
- Forre con esparadrapo o con otro tipo de cinta la parte superior de la botella para que no lastime la cara.